

808nm buen precio de China diodo láser para la depilación

funciones:

1.[Depilación](#)

Rejuvenecimiento 2.Skin

cuidado 3.Skin

Exposición de productos:





aplicaciones:

Para la depilación rápida, segura, indolora y permanente sobre los 6 tipos de piel, incluyendo piel oscura. Adecuado para los pelos no deseados en áreas como la cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and
bristles hair

Armpit hair




Leg hair

Descripciones de los productos:

ít.	808nm buen precio de China láser de diodo para la depilación
Tipo	Láser
tipo de láser	Semiconductor / láser indoloro congelación
Q-Switch	No
Estilo	Estacionario
instrumento láser modo de trabajo	modo de pulso

aleta de enfriamiento	240 * 2
longitud de onda	808nm + 10nm
el tamaño de punto de luz	10mm * 16mm
Ancho de pulso	10-300ms
energía máxima de un pulso	3J-140J
Los pulsos de energía	140J + 10J
alimentación del instrumento láser	1200W
Potencia de entrada	1600W
Tensión de trabajo	110V + 10%, 50Hz
idioma OSD	Ingles chino
especificación de los seguros	Max 10 A
Tamaño (máquina)	1180 * 500 * 385mm
Peso	≈51kg

Las imágenes del producto detalladas:

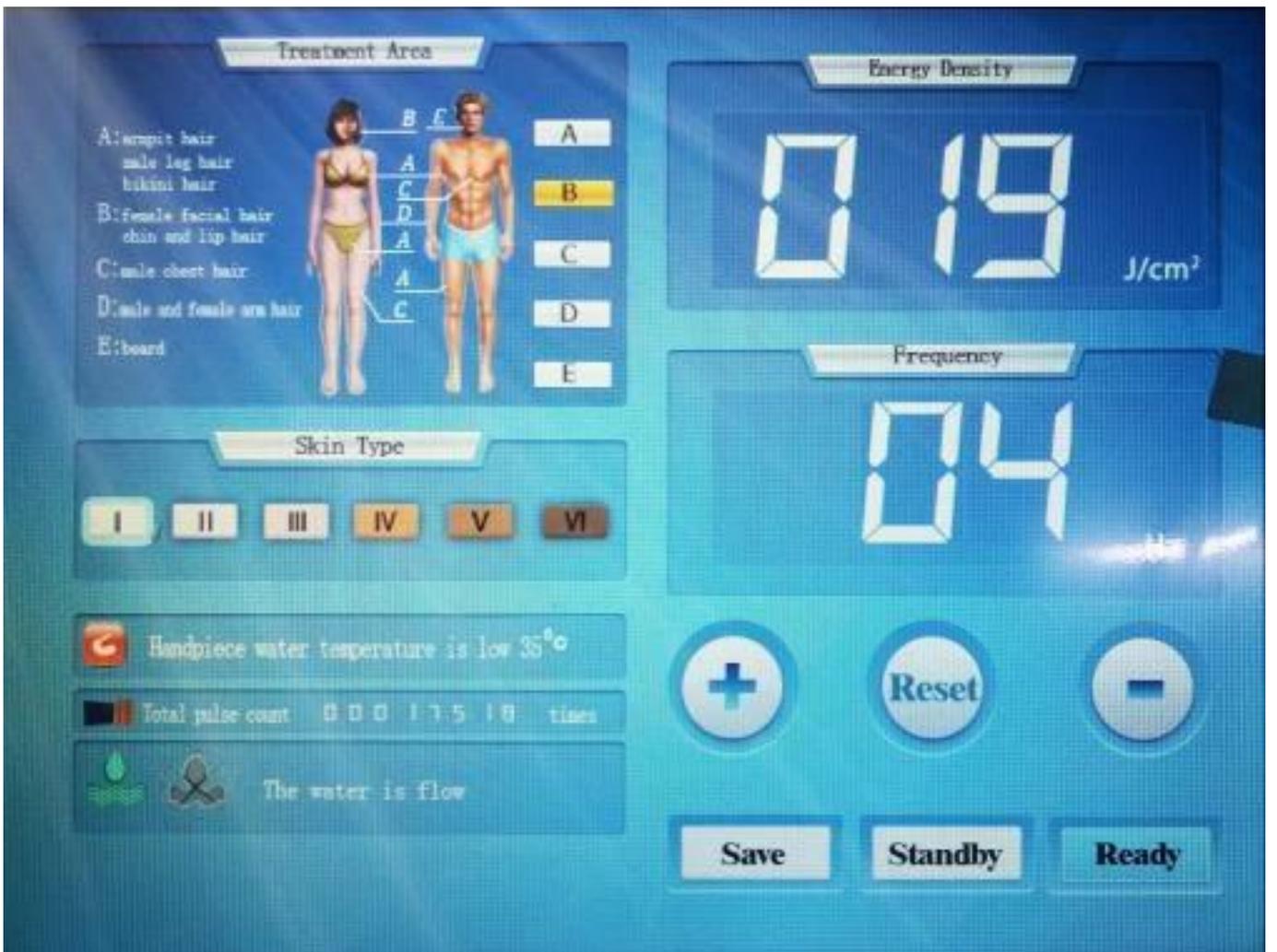

ventajas:

1. la eliminación del pelo punto de congelación del láser semiconductor trae **La tecnología de refrigeración micro canal de Alemania.** Y **Alemania bares importados**, confirmar la shooting de la máquina de más de 5.000.000 veces y tener suficiente energía.
2. **El sistema de filtro profesional**, Garantizar la pureza del agua circulante.
3. Un sistema de temperatura constante preciso, absolutamente dan cuenta del punto de congelación de depilación, garantiza plenamente el sistema de protección de la piel de zafiro mantener a una temperatura de 4°C. Y **el control estricto de la temperatura**, si la temperatura de más de 35 grados, el Machie dejará de trabajo, esto también puede proteger la seguridad de la terapia mango, especiall para los bares y filtro de cristal.
4. **808nm** semiconductores herramienta de mano láser puede darse cuenta **La depilación rápida y cómoda.**
5. **15mm-26mm tamaño de punto grande adecuada**, Que confirme la eliminación del vello de cualquier parte del cuerpo es flexible, como la depilación del labio, la depilación Vagine, etc..
6. **Taiwán fuente de alimentación importada**, esta es la mejor fuente de alimentación en el mercado, confirme la máquina estable y suficiente energía.

Packaging & entrega:

embalaje	1.Styrofoam 2.Fumigation caso de madera caja 3.Air
Entrega	Basado en su cantidad oredr





Principio de funcionamiento:


1. El tiempo de pulso de láser apropiado puede garantizar la energía acumulada para romper el tejido objetivo sin dañar los tejidos circundantes.

2. La densidad de energía apropiada puede proporcionar suficiente energía de salida en un determinado momento de romper los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes.

3. El epidérmica apropiada medida de protección puede asegurar suficiente daño de los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes.

4. El láser de impulsos múltiples series de este láser de

depilación de semiconductores elige el modo de baja densidad de energía relativa para calentar el rimel a 75°C, y mantener este estado con las herramientas de la mano resbale por debajo de 10 Hz, entonces tanto el rimel y el crecimiento de células madre se vuelven inactivas, alcanzando el objetivo de depilación definitiva

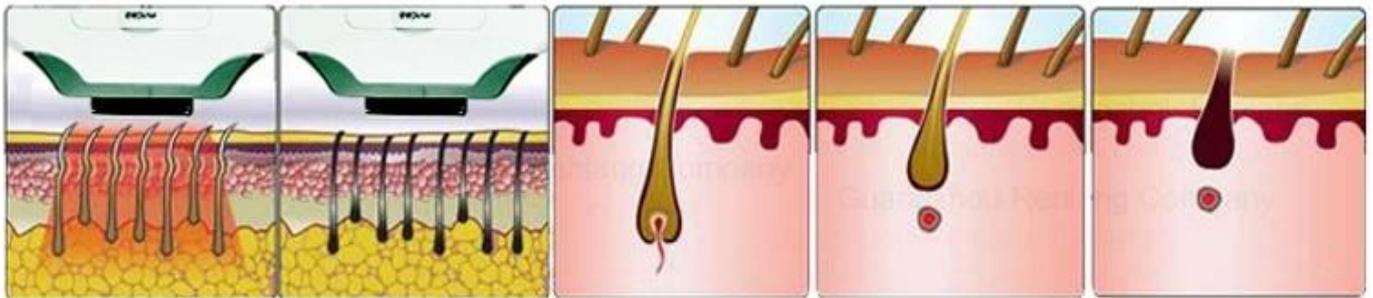

Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel & amp; Whatsapp: 0.086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com