

# Портативный лазерный диод 808nm Постоянное удаление волос(LY-TDL)



## Функция:

### **1. Удаление волос**

Избавиться от нежелательные волосы, как губы волосы, борода, волосы подмышками, волосы на руках, ногах andbikini области. Подходит как для светлой и темной кожи.

### **Омоложение кожи 2.**



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

## Приложения:

Для быстрой, безопасной, безболезненной и постоянное удаление волос на всех 6 типов кожи, в том числе темным цветом кожи.


Подходит для любых нежелательных волос на таких областях, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги ...



## **Теория работы:**

1. Прибор может эффективно проникать в ткани-мишени, и соответствующее время лазерного импульса может обеспечить накопленную энергию, чтобы разорвать ткани-мишени без повреждения окружающих тканей.
2. Соответствующая плотность энергии может обеспечить достаточную выходную энергию в определенное время, чтобы сломать тканях-мишениях, не повреждая окружающие ткани.
3. Соответствующая мера защиты эпидермального может обеспечить достаточно количество повреждений тканях-мишениях, не повреждая окружающие ткани.
4. мульти-импульсный лазер этого лазера серии удаления волос

полупроводниковым выбирает режим относительной низкой плотностью энергии, чтобы нагреть до 75°C тушь для ресниц, и поддерживать это состояние при помощи ручного инструмента скольжения под 10Hz, то как волосяной фолликул и стволовых рост клеток станет неактивным, достигнув цели постоянного удаления волос.

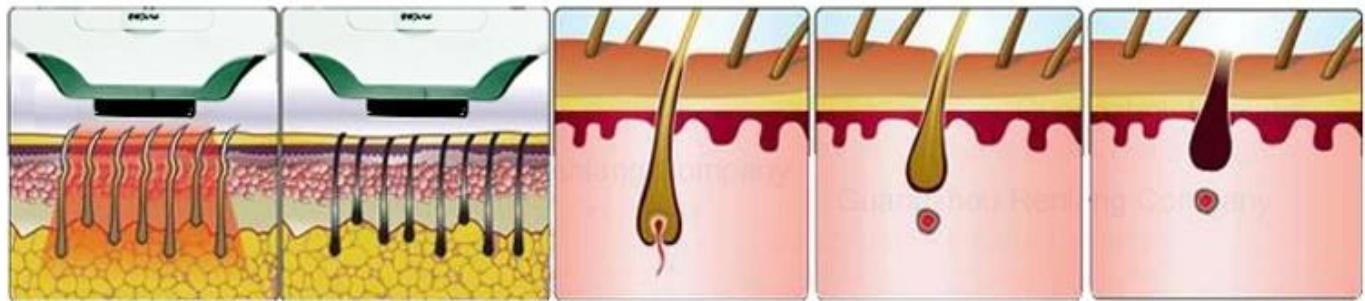

### Преимущества:

#### 1. Лучшее качество обслуживания клиентов

**Охладить и безболезненно:** Германия микроканальной технологии охлаждения понимают, точка замерзания для удаления волос, полностью гарантированная система защиты кожи сапфировым держать при температуре 4 ° С.

**Быстрая и полная:** Большой квадратный пятно увеличить площадь обработки и охватывает все уголки кожи.

**Нет гиперпигментации:** проникают непосредственно в ткани-мишени.

#### 2. безопаснее

**Регулирование температуры кожи:** технология охлаждения обеспечивает кожу в комфортное состояние.

**Нет воспаления:** лазерная энергия достигают непосредственно к волосяным луковицам, не повреждая кожу.

**Новейшая технология:** гарантировано новейшими технологиями в оптике долине в Китае, где лежит высокой плотности высокотехнологичных предприятий.

#### 3. Более эффективное

**Большое место:** 12мм \* 16мм большое пятно сделать его более легким для большого удаления волос область.

**Удобный:** Многоязычное меню подходят для различных операторов

**точная:** выход Высокая плотность энергии обеспечить его костюм для всех видов кожи. Лазерная энергия может достигать глубоких волосяные фолликулы и эффективно поглощаться.

**Гибкость:** Преобразователь частоты, максимальная выходная частота 10 Гц

#### **4. Более длительный срок службы**

**Система охлаждения:** Воздух + Вода + Диод + ТЕС охлаждения. ТЕС является последним методом охлаждения, который широко используют в холодильнике, этот новый метод охлаждения может подтвердить диодный лазер в более удобной рабочей среды и контролировать его при низкой температуре даже в течение длительного времени прилично работает.

**Строгий контроль температуры:** если температура превышает 35 степени, аппарат прекратит работу, это может также защитить безопасность терапии ручки, особенно для баров и кварцевого фильтра.

**Тайвань импортированных источник питания:** лучший источник питания на рынке, подтвердить машину стабильной и достаточно энергии.

**Германия импортировала бары:** подтвердить снимаем машины более 5000000 раз и иметь достаточное количество энергии.

#### **5. Снижение затрат на пробег**

С меньшим количеством времени обработки и длительный срок службы, блок эксплуатационные расходы на каждого клиента значительно снижается.

#### **6. В Lanyuan, вы можете найти наиболее подходящую машину для вашей красоты карьеры**

**Индивидуальные** сочетание функций для удовлетворения различных целей красоты.

**Различные случаи варианты** чтобы соответствовать другой стиль в вашей рабочей комнате.


**Продукт детальные изображения:**



磁力驱动循环泵  
型号 MP-20R  
额定流量 1.1 L/min  
额定扬程 27.1m  
额定功率 1.1 kW  
额定电压 220 V  
额定频率 50 Hz  
额定功率 2800 rpm  
切 力 空 轴 逆 转  
温州新飞山实业有限公司  
电话:0577-89602828 89602888

AS201505013  
2015/5/10/073

! 警告

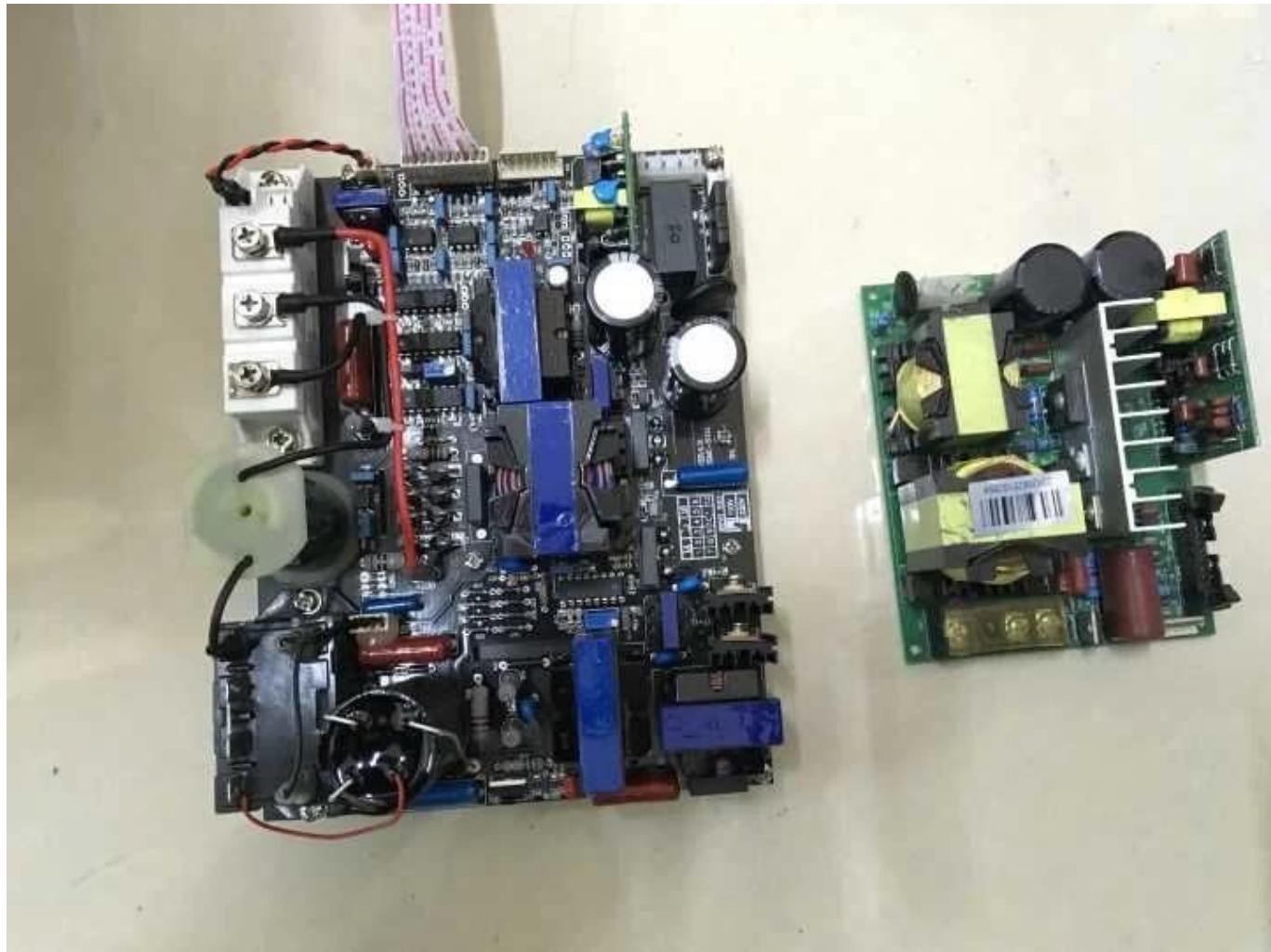

## Описание товара:

Пункт	Портативный лазерный диод 808nm <a href="#">Постоянное удаление волос</a>
Тип	лазер
Тип лазера	Semiconductor / замерзает безболезненный лазер
Q-Switch	Нет
Стиль	портативный
Лазерный прибор рабочий режим	Импульсный режим
Длина волны луча прицеливания	контактного типа без направленного луча
длина волны	808nm
Система световод	прямой выход
Свет размер пятна	20мм * 20мм

ширина импульса	10-300ms
Максимальная энергия импульса	3J-140J
Импульсы энергии	140J + 10J
Лазерный прибор питания	600W
Входная мощность	1200W
Рабочее напряжение	110V + 10%, 50 Гц
Язык экранного меню	Китайский, английский
Операционная система	8,0 или 10,4-дюймовый цветной сенсорный экран умный
спецификация страхование	Макс 10 А

### **Обслуживание:**


1. Технические инструкции документы.
2. Техническая поддержка по фото-, видео- и онлайн-обучения.
3. Ответ в течение 24 часов.

### **Гарантия:**

Одна гарантированность года, пожизненное содержание.  
Наша техническая поддержка инженеров будет постоянной.

### **Пакет, Shipping & Amp; Доставка:**

пакет	Приборы хорошо упакованы пенопласт, воздушной коробки или фумигации деревянных ящиков.
Перевозка	По воздуху, по морю или курьерским.
Доставка	3-10 рабочие дни

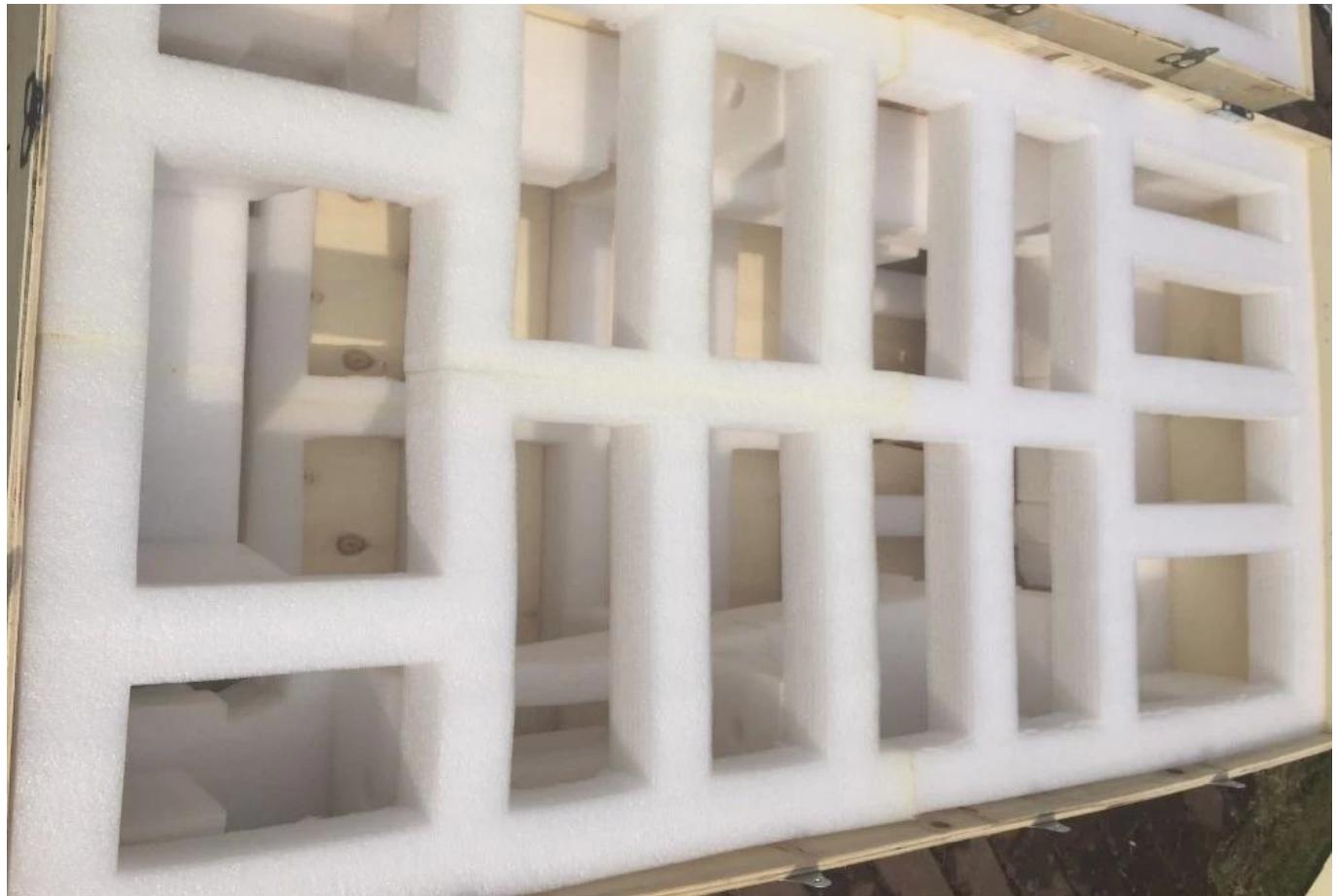

Контактное лицо: Racher Cheng  
Tel & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178  
Skype: sales2@lanyuansupply.com  
Эл. адрес: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)