

Dioden-Laser-Maschine Verwendet im Salon und Hospital (LY-DL1)



Funktion:

1. Haarentfernung

Beseitigen, abschütteln unerwünschte Haare wie Lippe Haare, Bart, Achselhaare, Haare an Armen, Beinen and bikini Bereich. Geeignet für sowohl helle als auch dunkle Haut.

2. Hautverjüngung



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Anwendungen:

Für schnell, sicher, schmerzlos und dauerhafte
Haarentfernung auf allen 6 Hauttypen, auch dunkle Haut.
Geeignet für alle unerwünschten Haare auf Bereiche wie
Gesicht, Arme, Achseln, Brust, Rücken, Bikini, Beine ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and
bristles hair

Armpit hair




Leg hair

Arbeitstheorie:

1. Das Gerät kann auf dem Zielgewebe effektiv durchdringen, und die entsprechende Laserpulszeit kann die akkumulierte Energie sicherzustellen, das Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
2. Die entsprechende Energiedichte kann genügend Energieabgabe in einer bestimmten Zeit liefern die Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
3. Die entsprechende epidermale Schutzmaßnahme kann genug Schaden der anvisierten Gewebe gewährleisten, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.

4. Der Multipuls-Laser dieser Halbleiter-Laser-Haarentfernung Serie wählt den Modus einer relativ geringen Energiedichte Mascara auf 75 ° C zu erwärmen und halten diesen Zustand mit den Handwerkzeugen unter 10Hz schieben und dann sowohl die Haarfollikel und das Zellwachstum eindämmen wird inaktiv, um das Ziel der dauerhaften Haarentfernung zu erreichen.

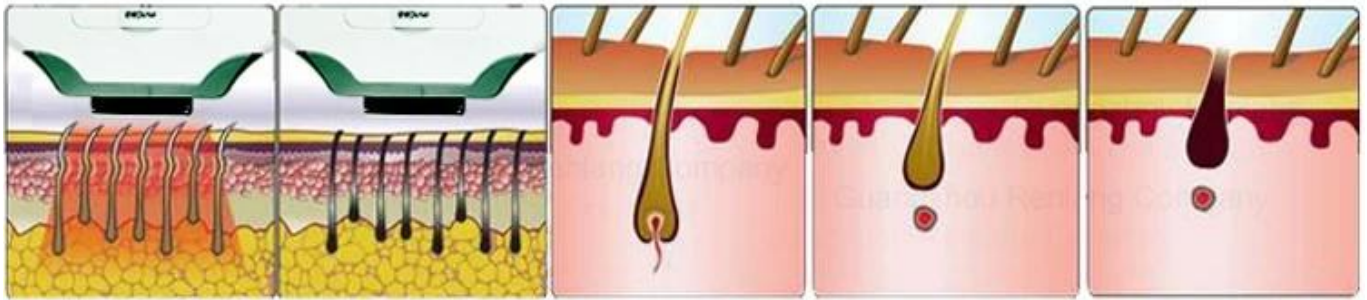

Vorteile:

1. Bessere Kundenerfahrung

Kühl und schmerzlos: Deutschland Mikrokanalkühltechnik realisieren Gefrierpunkt Haarentfernung, vollständig das Saphirhautschutzsystem garantiert halten bei einer Temperatur von 4 ° C.

Schnell und vollständig: Große Platz Ort, um den Behandlungsbereich zu erhöhen und deckt alle Ecken der Haut.

Nein Hyperpigmentierung: direkt in das Zielgewebe eindringen können.

2. Mehr Sicherheit

Hauttemperaturregelung: die Kühltechnik sorgt für die Haut in komfortablen Zustand.

Keine Entzündung: die Laserenergie ohne Beschädigung der Haut direkt auf die Haarfollikel erreichen.

Neueste Technik: garantiert durch die neueste Technologie

in Optics Valley in China, wo liegt die High-Density-High-Tech-Unternehmen.

3. Effizientere

Große Spot: 12mm * 16mm großen Spot machen es einfacher für große Fläche Haarentfernung.

Benutzerfreundlich: Multi-Language-Menü für verschiedene Betreiber

Genau: Hohe Energiedichte Ausgang sicherzustellen, dass es für alle Arten von Haut anpassen. Die Laserenergie kann tief Haarfollikel erreichen und effektiv absorbiert werden.

Flexibel: einstellbarer Frequenz, maximale Ausgangsfrequenz 10Hz

4. Längere Lebensdauer

Kühlsystem Wasser + Diode + TEC Cooling Air +: TEC ist die neueste Kühlverfahren, die weit in den Kühlschrank zu verwenden, diese neue Kühlverfahren die Diodenlaser in einem geeigneteren Arbeitsumgebung und in der niedrigen Temperatur steuern kann bestätigen, sogar für contentiously lange Zeit arbeiten.

Strenge Temperaturregelung: wenn die Temperatur über 35 Grad ist, wird die Maschine Arbeit zu stoppen, kann dies auch zum Schutz der Therapie Griff Sicherheit, vor allem für die Stäbe und Kristallfilter.

Taiwan importiert Stromversorgung: die beste Stromversorgung auf dem Markt, bestätigen die Maschine stabil und Energie genug.

Deutschland importiert Bars: die shooting der Maschine über 5.000.000 mal bestätigen und genug Energie haben.

4. Niedrigere Betriebskosten

Mit weniger Behandlungszeit und eine längere Lebensdauer, ist das Gerät laufenden Kosten auf jeden Kunden erheblich verringert.


5. In Lanyuan können Sie die am besten geeignete Maschine für Ihre Schönheit Karriere finden

Customized Funktion Kombination verschiedener Schönheit Zweck zu erfüllen.

Verschiedene Fälle Optionen anderen Stil in Ihrem Arbeitsraum zu passen.

Produktdetailbilder:



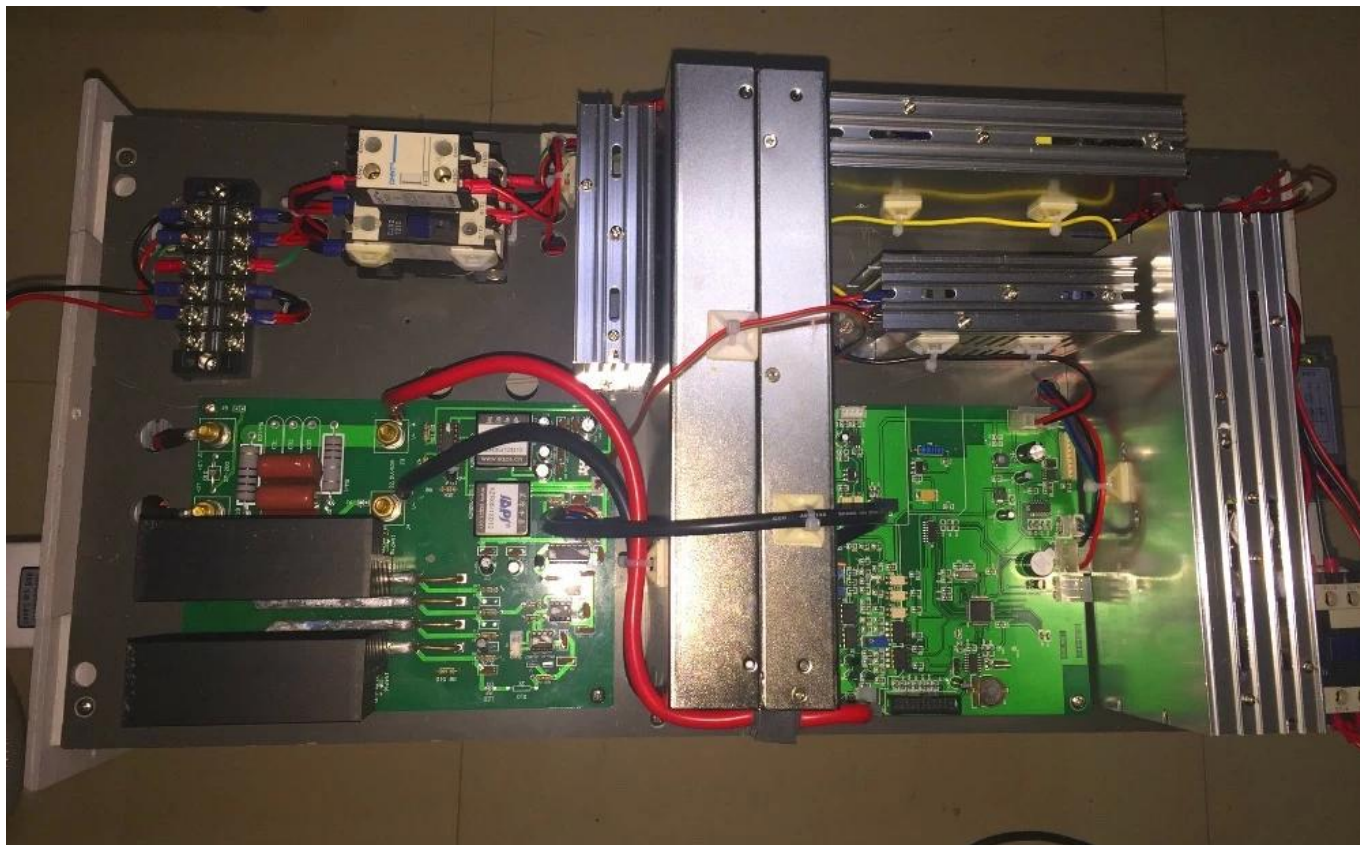

Produktbeschreibungen:

Artikel	Dioden-Laser-Maschine Gebraucht in Salon und Krankenhaus
Modell Nr.	LY-DL1
Art	Laser
Lasertyp	Halbleiter / Einfrieren schmerzlos Laser
Q-Switch	Nein
Stil	Stationär
Laserinstrument Arbeitsmodus	Impulsbetrieb
abkühlende Flosse	240 * 2
Wellenlänge	808nm + 10 nm
Lichtfleckgröße	10mm * 16mm

Impulsbreite	10-300ms
Maximale Energie eines Pulses	3J-140J
Impulse Energie	140J + 10J
Laserinstrument Leistung	600W
Eingangisleistung	1200W
Betriebsspannung	110V + 10%, 50 Hz
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch
Versicherungs Spezifikation	Max 10 A
Größe (Maschine)	1180 * 500 * 385mm
Gewicht	≈51kg

Bedienung:

1. Technische Anleitung Dokumente.
2. Technische Unterstützung von Bildern, Videos und Online-Unterricht.
3. Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Garantie:

Ein Jahr Garantie, die Erhaltung des Lebens.

Unsere Ingenieure technische Unterstützung wird konstant sein.

Paket, Versand & amp; Lieferung:

Paket	Instrumente gut durch Styropor, Luftfilterkasten oder Begasung Holzkisten verpackt.
-------	---

Versand	Mit dem Flugzeug, auf dem Seeweg oder durch Eil.
Lieferanten	3-10 Arbeitstage



Kontakt: Racher Cheng

Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com