

Hohe Leistung 1200W Diode Laser- Haarentfernung Maschine

Funktionen:

1. [Haarentfernung](#)
2. Skin Rejuvenation
3. Skin Pflege

Produktausstellung:





Anwendungen:

Für schnell, sicher, schmerzlos und dauerhafte
Haarentfernung auf allen 6 Hauttypen, auch dunkle Haut.
Geeignet für alle unerwünschten Haare auf Bereiche wie
Gesicht, Arme, Achseln, Brust, Rücken, Bikini, Beine ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and
bristles hair

Armpit hair





Leg hair

Produktbeschreibungen:

Artikel	Hohe Leistung 1200W Diode Laser-Haarentfernung Maschine
Art	Laser
Lasertyp	Halbleiter / Einfrieren schmerzlos Laser
Q-Switch	Nein
Stil	Stationär
Laserinstrument Arbeitsmodus	Impulsbetrieb

abkühlende Flosse	240 * 2
Wellenlänge	808nm + 10 nm
Lichtfleckgröße	10mm * 16mm
Impulsbreite	10-300ms
Maximale Energie eines Pulses	3J-140J
Impulse Energie	140J + 10J
Laserinstrument Leistung	1200W
Eingangsleistung	1600W
Betriebsspannung	110V + 10%, 50 Hz
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch
Versicherungs Spezifikation	Max 10 A
Größe (Maschine)	1180 * 500 * 385mm
Gewicht	≈51kg

Produktdetailbilder:

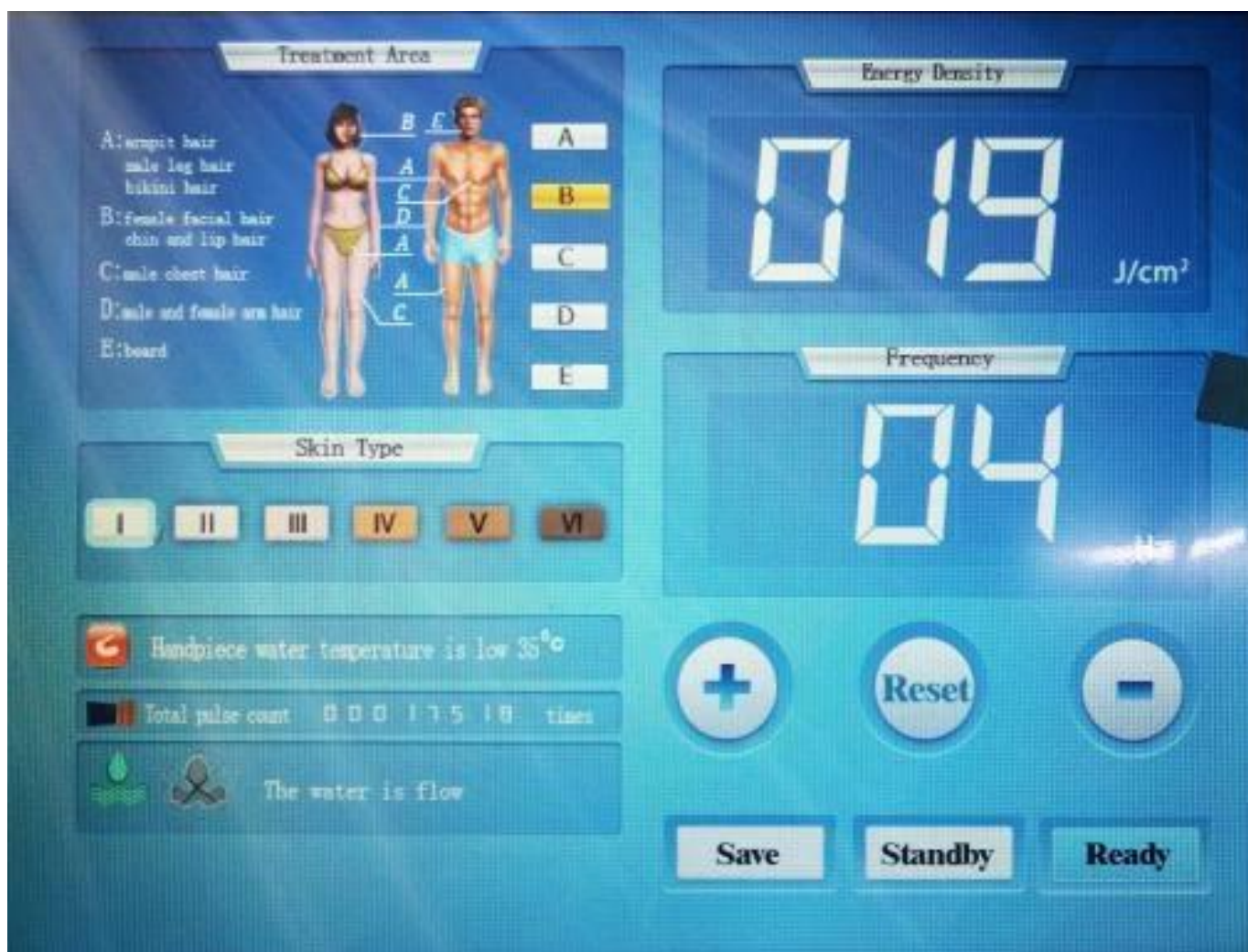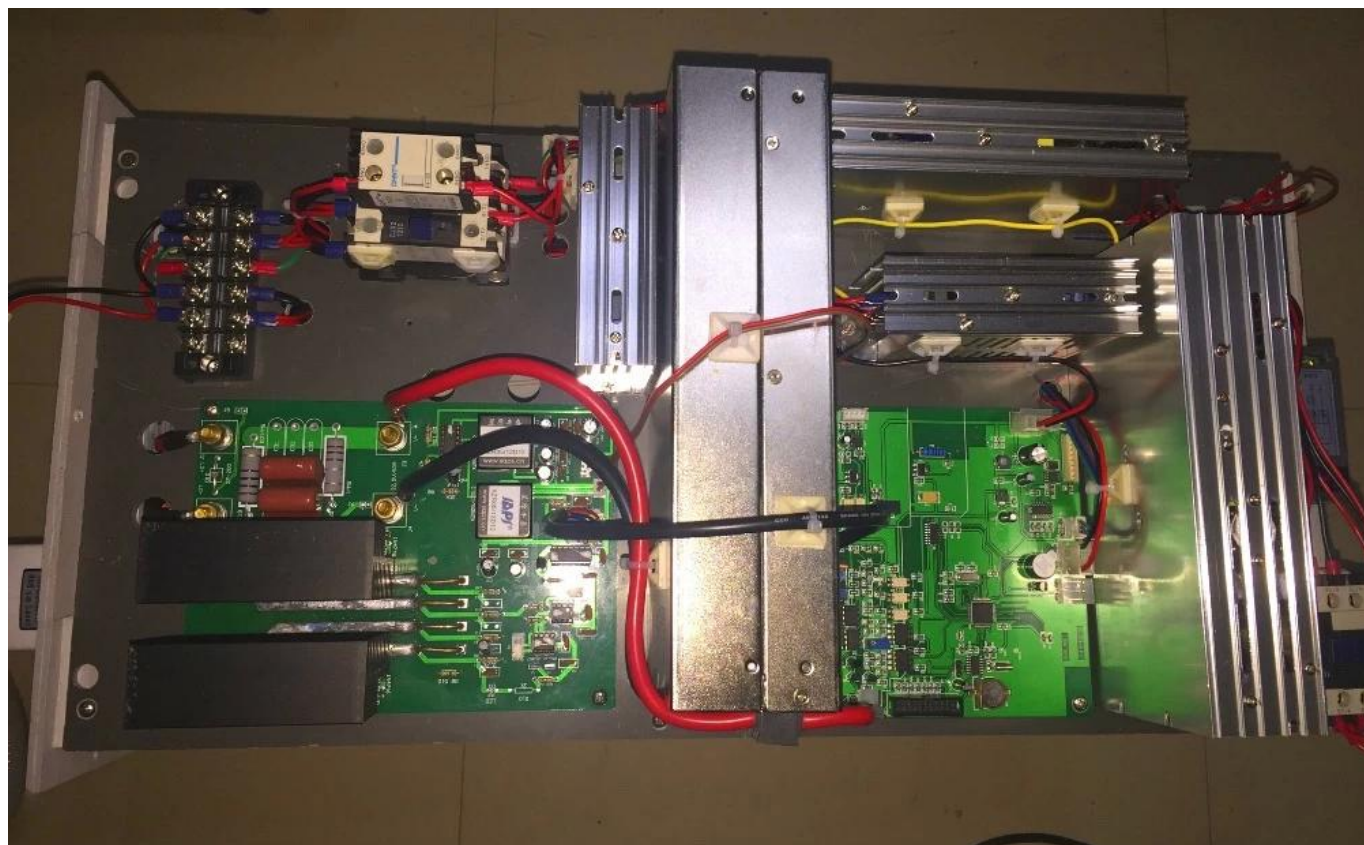

Vorteile:

1. Gefrierpunkt Haarentfernung von Halbleiterlaser bringt **Deutschland Mikrokanalkühltechnik**. Und **Deutschland importiert Bars**. die shooting der Maschine über 5.000.000 mal bestätigen und genug Energie haben.
2. **Das professionelle Filtersystem**, Um die Reinheit des zirkulierenden Wassers gewährleisten.
3. Eine genaue konstante Temperatur System realisieren absolut Gefrierpunkt Haarentfernung, vollständig das Saphirhautschutzsystem halten bei einer Temperatur von 4 ° C gewährleistet. Und **strenge Temperaturkontrolle**. wenn die Temperatur über 35 Grad, wird die machie Arbeit zu stoppen, kann dies auch die Therapie Griff Sicherheit zu schützen, especiall für die Stäbe und Kristallfilter.
4. **808nm** Halbleiterlaser-Handwerkzeug kann erkennen, **schnelle und komfortable Haarentfernung**.
5. **15mm-26mm geeignet großen Spotgröße** Es die Haarentfernung für jeden Teil des Körpers zu bestätigen ist flexibel, wie Lippenhaarentfernung, vagine Haarentfernung, usw..
6. **Taiwan importiert Stromversorgung**. dies ist die beste Stromversorgung auf dem Markt, die Maschine stabil und Energie genug bestätigen.

Verpackung & amp; Lieferung:

Verpackung	1.Styrofoam 2.Fumigation Holzkiste 3.Air Box
Lieferanten	Auf der Basis Ihrer oredr Menge






Funktionsprinzip:

1. Die geeignete Laserpulsdauer kann die gespeicherte Energie sicherzustellen, das Zielgewebe zu brechen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.
2. Das geeignete Energiedichte genügend Energieabgabe in einer bestimmten Zeit liefern die Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
3. Die entsprechenden epidermalen Schutzmaßnahme kann ohne Beschädigung der umgebenden Gewebe genug Schaden der anvisierten Gewebe zu gewährleisten.
4. Die Mehrpulslaser dieser Haarentfernung Serie

Halbleiterlaser wählt den Modus einer relativ geringen Energiedichte Mascara auf 75 ° C zu erwärmen und halten diesen Zustand mit den Handwerkzeugen unter 10Hz schieben und dann sowohl die Mascara und das Zellwachstum entstammen inaktiv, um das Ziel der dauerhaften Haarentfernung zu erreichen

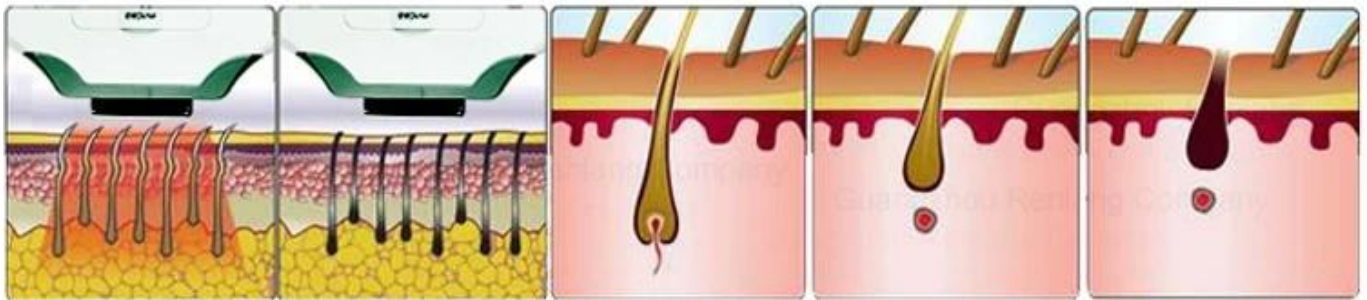

Kontakt: Racher Cheng

Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com