

Diodo láser portátil para la depilación y rejuvenecimiento de la piel(LY-TDL)



Función:

1. Depilación

Deshacerse de al igual que el vello no deseado labio cabello, la barba, el vello axilar, vello de los brazos, las piernas área andbikini. Adecuado tanto para piel clara y oscura.

Rejuvenecimiento de la piel 2.



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

aplicaciones:

Para la depilación rápida, segura, indolora y permanente sobre los 6 tipos de piel, incluyendo piel oscura. Adecuado para los pelos no deseados en áreas como la cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and
bristles hair

Armpit hair




Leg hair

Teoría de trabajo:

1. El instrumento puede penetrar eficazmente en el tejido objetivo, y el tiempo de pulso de láser apropiado puede garantizar la energía acumulada para romper el tejido objetivo sin dañar los tejidos circundantes.
2. La densidad de energía apropiada puede proporcionar suficiente energía de salida en un determinado momento de romper los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes.
3. La medida de protección epidérmico apropiado puede garantizar suficiente daño de los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes.
4. El láser de impulsos múltiples de este láser serie depilación semiconductor elige el modo de una baja densidad de energía relativa

para calentar el rimel a 75°C, y mantener este estado con las herramientas de mano resbale por debajo de 10 Hz, entonces tanto el folículo del pelo y crecimiento de células madre quedará inactiva, alcanzar la meta de la depilación permanente.

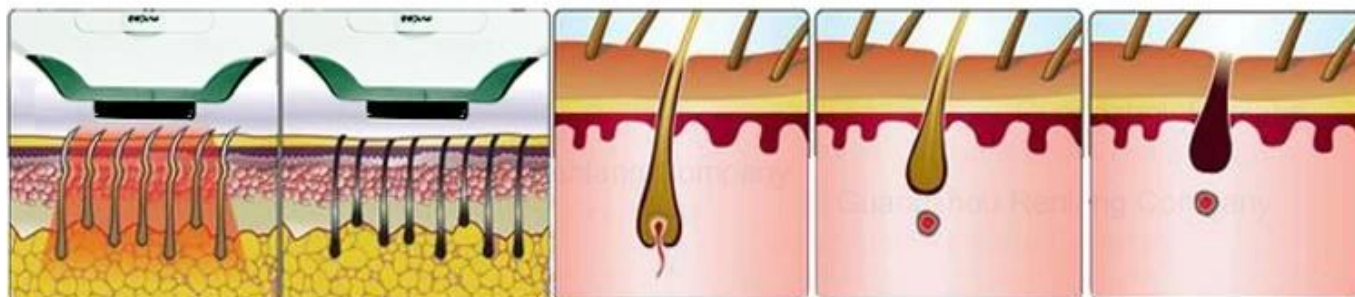

ventajas:

1. Una mejor experiencia del cliente

Fresco y sin dolor: Alemania micro canal de tecnología de enfriamiento se da cuenta del punto de congelación de depilación, garantiza plenamente el sistema de protección de la piel de zafiro mantener a una temperatura de 4°C.

Rápida y completa: Gran mancha cuadrada aumentar el área de tratamiento y cubre todos los rincones de la piel.

Sin hiperpigmentación: penetrar directamente en el tejido diana.

2. Más seguro

control de la temperatura de la piel: la tecnología de refrigeración asegura la piel en condiciones confortables.

Sin la inflamación: la energía del láser alcanza directamente a los folículos del pelo sin dañar la piel.

Última tecnología: garantizada por la tecnología más avanzada en Óptica Valle de China, donde se encuentra las empresas de alta tecnología de alta densidad.

3. Más eficiente

Gran mancha: 12mm * 16mm gran mancha que sea más fácil para la eliminación de gran superficie del cabello.

Fácil de usar: menú en varios idiomas adecuados para diferentes operadores

Preciso: salida de alta densidad de energía asegurarse de que se adapte a todo tipo de piel. La energía láser puede alcanzar los folículos pilosos

profundas y ser absorbido de manera efectiva.

Flexible: de frecuencia, la frecuencia de salida máxima es de 10 HZ

4. Vida útil más larga

Sistema de refrigeración: Aire + Agua + Diodo + TEC de refrigeración. TEC es el método de enfriamiento más reciente que utilizan ampliamente en el refrigerador, este nuevo método de enfriamiento puede confirmar el láser de diodo en un entorno de trabajo más adecuado y controlarlo de baja temperatura incluso para mucho tiempo contenciosamente de trabajo.

El estricto control de la temperatura: Si la temperatura es mayor de 35 grados, la máquina va a dejar de trabajar, esto también puede proteger la seguridad mango terapia, especialmente para los bares y filtro de cristal.

Taiwán importó fuente de alimentación: la mejor fuente de alimentación en el mercado, confirme la máquina estable y suficiente energía.

Alemania importó barras: confirmar la shooting de la máquina de más de 5.000.000 veces y tener suficiente energía.

5. Bajo coste de funcionamiento

Con menos tiempo de tratamiento y una vida útil más larga, el costo unitario que se ejecuta en cada cliente se reduce considerablemente.


6. En Lanyuan, se puede encontrar la máquina más adecuada para su carrera profesional de la belleza

personalizado Combinaciones de maniobra para satisfacer diferentes propósitos belleza.

opciones diferentes casos para que coincida con el estilo diferente en su sala de trabajo.

Las imágenes del producto detalladas:



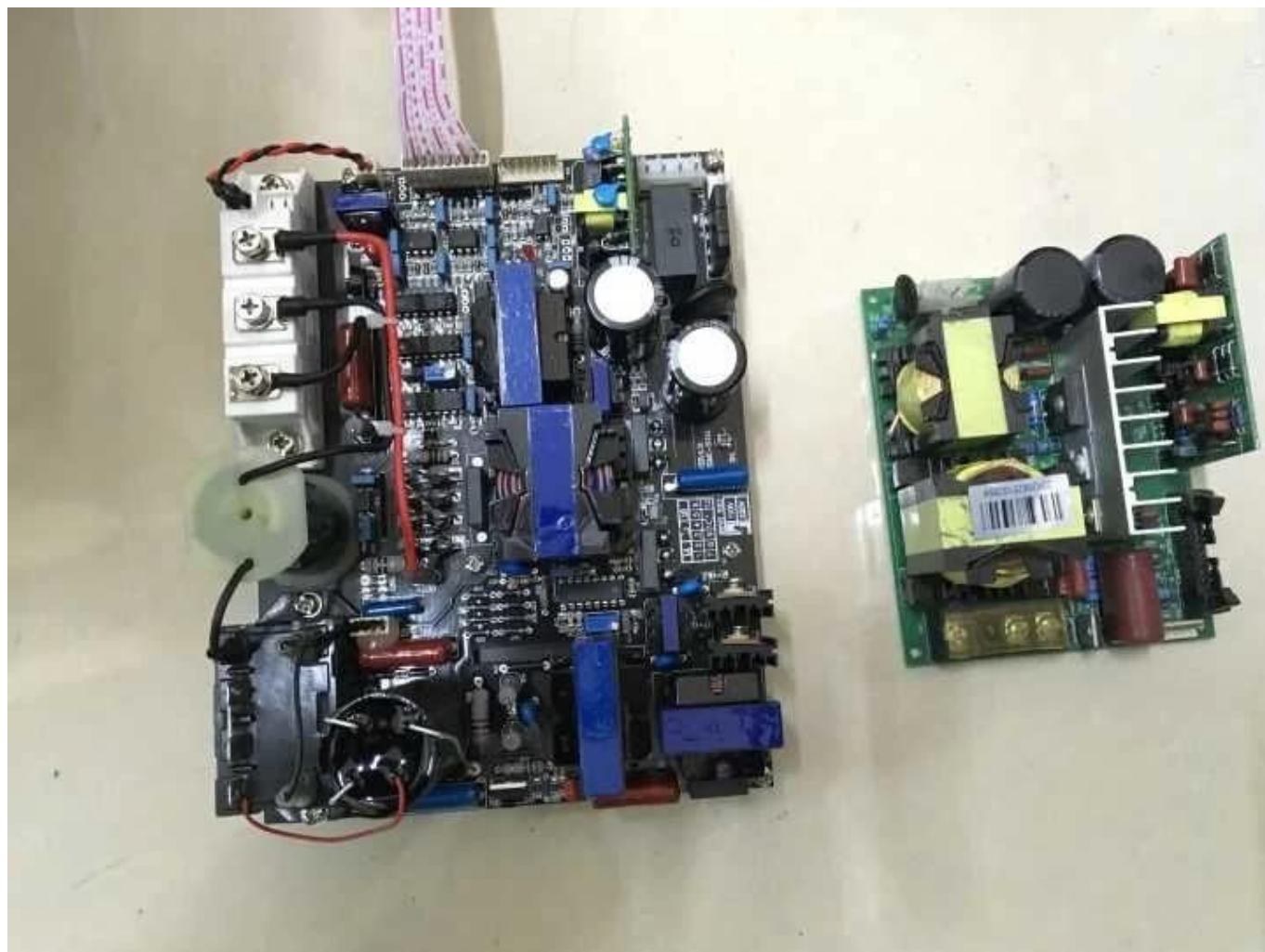

Descripciones de los productos:

ít.	Diodo láser portátil para la depilación y rejuvenecimiento de la piel
Tipo	Láser
tipo de láser	Semiconductor / láser indoloro congelación
Q-Switch	No
Estilo	Portátil
instrumento láser modo de trabajo	modo de pulso
Longitud de onda de haz de encuadre	Del tipo de contacto y sin orientación de los faros
longitud de onda	808nm
sistema de guía de luz	salida directa
el tamaño de punto de luz	20mm * 20mm

Ancho de pulso	10-300ms
energía máxima de un pulso	3J-140J
Los pulsos de energía	140J + 10J
alimentación del instrumento láser	600W
Potencia de entrada	1200W
Tensión de trabajo	110V + 10%, 50Hz
idioma OSD	Ingles chino
Sistema operativo	inteligente de pantalla táctil 8.0 o 10.4 pulgadas a color
especificación de los seguros	Max 10 A

Servicio:


1. Los documentos de instrucciones técnicas.
2. Apoyo técnico por imágenes, videos y la instrucción en línea.
3. Respuesta en 24 horas.

Garantía:

Un año de garantía, el mantenimiento de toda la vida.
Nuestro soporte técnico ingenieros será constante.

El paquete, Shipping & amp; Entrega:

Paquete	Instrumentos bien embalados por espuma de poliestireno, caja de aire o de fumigación cajas de madera.
Envío	Por aire, por mar o por expreso.
Entrega	3-10 días hábiles

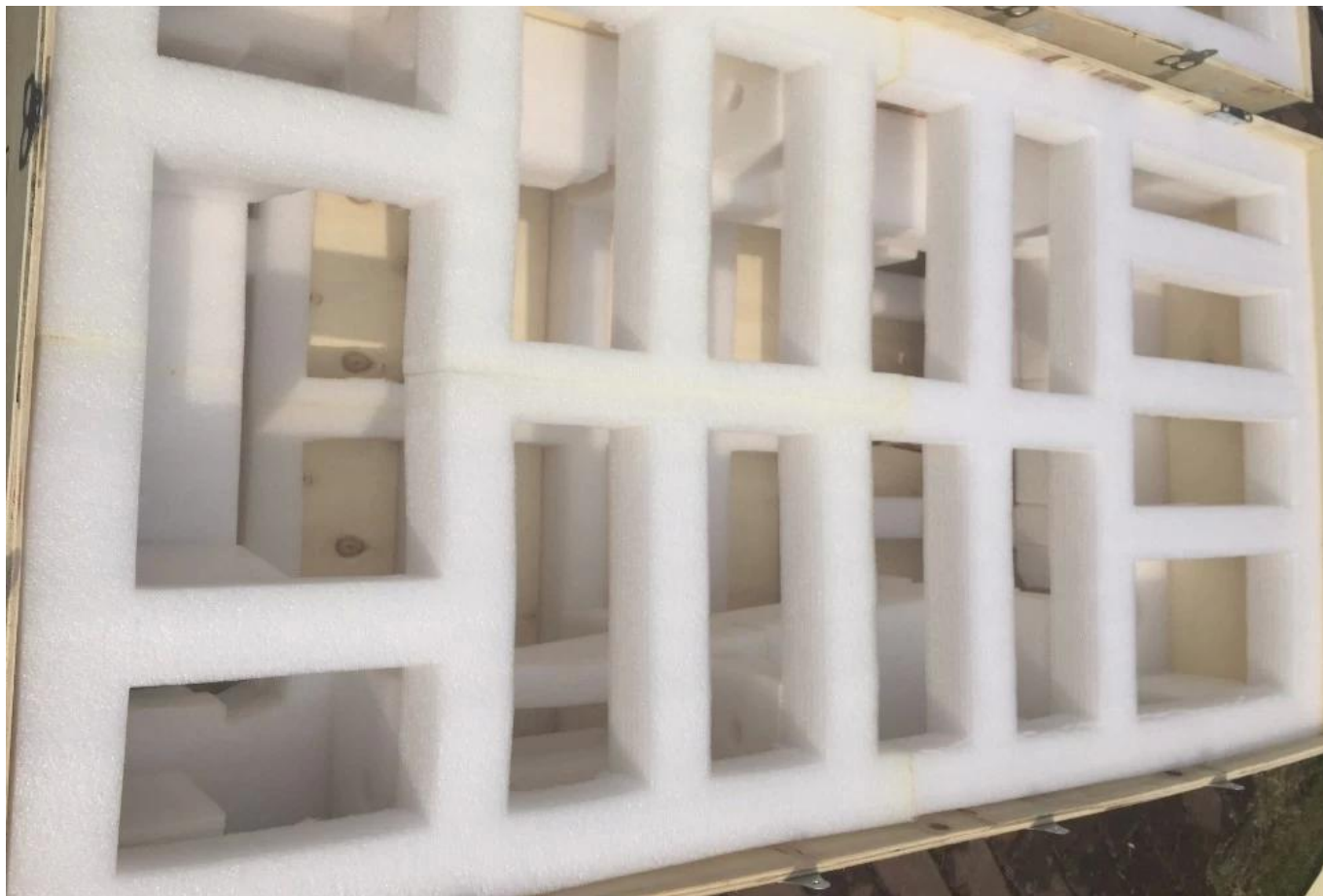

Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel & amp; Whatsapp: 0.086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com