

Meilleur Diode 808nm de vente Laser Hair Removal

Les fonctions:

1. [Épilation](#)
2. Skin Rejuvenation
soins
3. Skin

exposition du produit:





Applications:

Pour l'épilation rapide, sûr, indolore et permanent sur les 6 types de peau, y compris la peau foncée. Convient pour tous les poils indésirables sur les zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, bikini, jambes ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair

Armpit hair



Thoracic and
bristles hair




Leg hair

Les descriptions de produits:

Article	Meilleur 808nm de vente Diode Laser Hair Removal
Type	Laser
Type de laser	Semiconductor / laser indolore congélation
Q-Switch	Non
style	Stationnaire

instrument laser de mode de fonctionnement	Mode Pulse
refroidissement Fin	240 * 2
Longueur d'onde	808nm + 10nm
la taille de la tache lumineuse	12mm * 20mm
Largeur d'impulsion	10-300ms
l'énergie maximale d'une impulsion	3J-140J
Impulsions énergie	140J + 10J
puissance instrument laser	600W
La puissance d'entrée	1200W
Tension de travail	110V + 10%, 50Hz
Langue OSD	Chinois, anglais
spécification de l'assurance	10 A max
Taille (Machine)	1180 * 500 * 385mm
Poids	≈51kg

Produit des images détaillées:

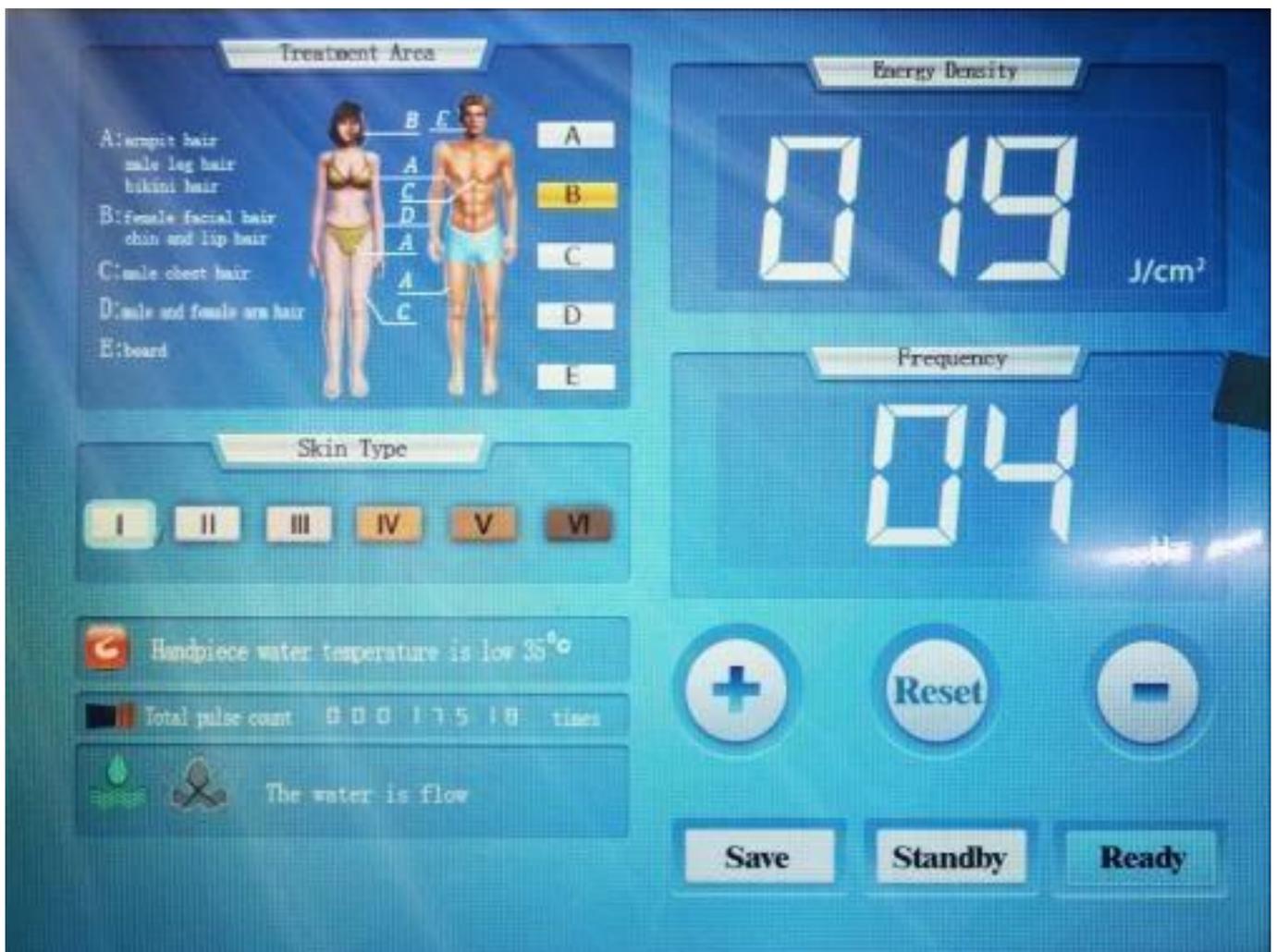

avantages:

1. Congélation retrait point de cheveux de laser semi-conducteur apporte **Allemagne micro canal technologie de refroidissement**. Et **Allemagne barres importées**, confirmer la shooting de la machine sur 5.000.000 fois et avoir assez d'énergie.
2. **Le système de filtre professionnel**, D'assurer la pureté de l'eau en circulation.
3. Un système de température précise et constante, réalisent absolument point de congélation épilation, entièrement garantie du système de protection de la peau de saphir maintenir à la température de 4°C. Et **le contrôle strict de la température**, si la température de plus de 35 degrés, l'machie va arrêter le travail, cela peut bien protéger la sécurité de la poignée de thérapie, especiall pour les barres et le filtre à cristal.
4. **808nm** outil à main laser semi-conducteur peut réaliser **retrait rapide et confortable cheveux**.
5. **12mm-20mm grande taille appropriée spot** Il confirme l'épilation pour une partie du corps est flexible, tel que l'épilation des lèvres, l'enlèvement vagine des cheveux, etc..
6. **Taiwan alimentation importée**, c'est la meilleure alimentation sur le marché, confirmer la machine stable et assez d'énergie.

Packaging & livraison:

Emballage	1.Styrofoam 2.Fumigation caisse en bois boîte de 3.Air
Livraison	Sur la base de la quantité de votre oredr





Principe de fonctionnement:


1. Le laser approprié temps d'impulsion peut assurer l'énergie accumulée pour briser le tissu ciblé sans endommager les tissus environnants.

2. Le densité d'énergie appropriée peut fournir la production d'énergie suffisante dans un certain temps pour briser les tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.

3. Le épidermique approprié mesure de protection peut assurer suffisamment de dégâts des tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.

4. Le laser à impulsions multiples de ce laser série d'épilation

semi-conducteur choisit le mode d'une densité relative de faible énergie pour chauffer le mascara à 75°C, et maintenir cet état avec les outils à main glissant sous 10Hz, alors à la fois le mascara et croissance des cellules souches sera devenu inactif, pour atteindre l'objectif de l'épilation permanente

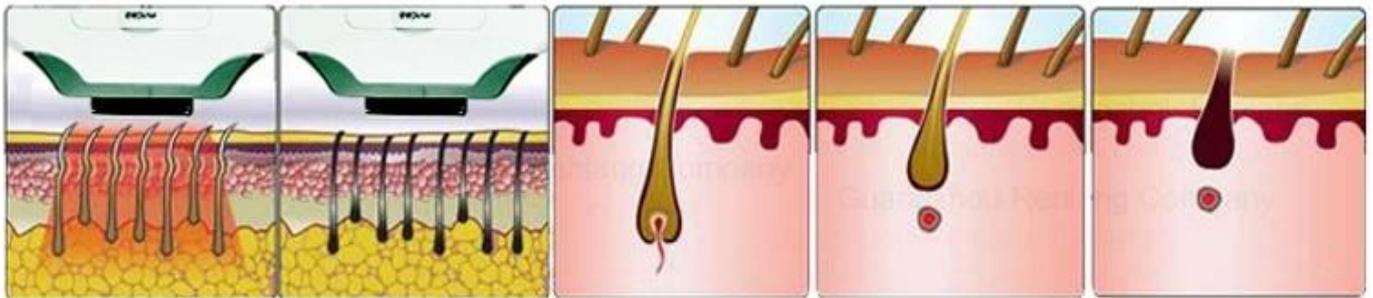

Contact: Racher Cheng

Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com