

# Удаление 808 волос лазера диода для клиники, салона и больницы (LY-DL2



## **Функция:**

### **1. Удаление волос**

Избавиться от нежелательные волосы, как губы волосы, борода, волосы подмышками, волосы на руках, ногах and bikini области. Подходит как для светлой и темной кожи.

### **Омоложение кожи 2.**



### **Приложения:**

Для быстрой, безопасной, безболезненной и постоянное удаление волос на всех 6 типов кожи, в том числе темным цветом кожи.

Подходит для любых нежелательных волос на таких областях, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and  
bristles hair



Leg hair


Armpit hair



## Теория работы:

1. Прибор может эффективно проникать в ткани-мишени, и соответствующее время лазерного импульса может обеспечить накопленную энергию, чтобы разорвать ткани-мишени без повреждения окружающих тканей.
2. Соответствующая плотность энергии может обеспечить достаточную выходную энергию в определенное время, чтобы сломать тканях-мишенях, не повреждая окружающие ткани.
3. Соответствующая мера защиты эпидермального может обеспечить достаточное количество повреждений тканях-мишенях, не повреждая окружающие ткани.
4. мульти-импульсный лазер этого лазера серии удаления волос

полупроводниковым выбирает режим относительной низкой плотностью энергии, чтобы нагреть до 75°C тушь для ресниц, и поддерживать это состояние при помощи ручного инструмента скольжения под 10Hz, то как волосяной фолликул и стволовых рост клеток станет неактивным, достигнув цели постоянного удаления волос.

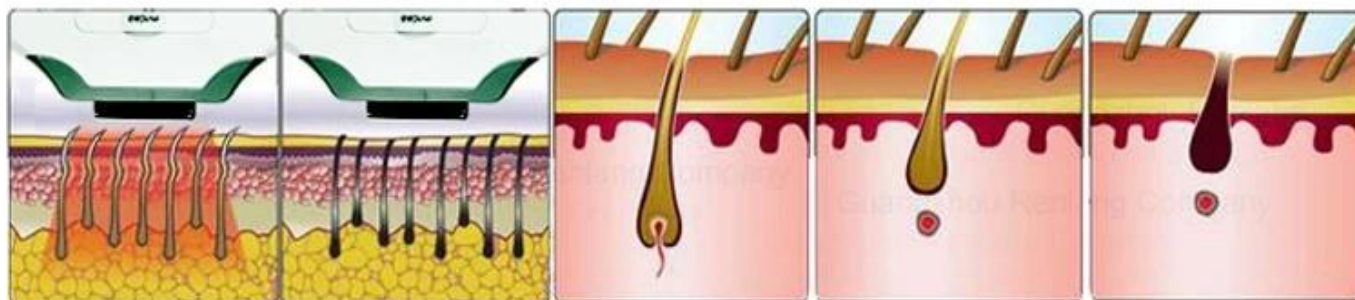

## Преимущества:

### 1. Лучшее качество обслуживания клиентов

**Охладить и безболезненно:** Германия микроданальной технологии охлаждения понимают, точка заморзания для удаления волос, полностью гарантированная система защиты кожи сапфировым держать при температуре 4 ° C.

**Быстрая и полная:** Большой квадратный пятно увеличить площадь обработки и охватывает все уголки кожи.

**Нет гиперпигментации:** проникают непосредственно в ткани-мишени.

### 2. безопаснее

**Регулирование температуры кожи:** технология охлаждения обеспечивает кожу в комфортное состояние.

**Нет воспаления:** лазерная энергия достигают непосредственно к волосяным луковицам, не повреждая кожу.

**Новейшая технология:** гарантировано новейшими технологиями в оптике долине в Китае, где лежит высокой плотности высокотехнологичных предприятий.

### 3. Более эффективное

**Большое место:** 12мм \* 16мм большое пятно сделать его более легким для большого удаления волос область.

**Удобный:** Многоязычное меню подходит для различных операторов

**точная:** выход Высокая плотность энергии обеспечить его костюм для всех видов кожи. Лазерная энергия может достигать глубоких волосяные фолликулы и эффективно поглощаться.

**Гибкость:** Преобразователь частоты, максимальная выходная частота 10 Гц

#### **4. Более длительный срок службы**

**Система охлаждения:** Воздух + Вода + Диод + ТЕС охлаждения. ТЕС является последним методом охлаждения, который широко используют в холодильнике, этот новый метод охлаждения может подтвердить диодный лазер в более удобной рабочей среды и контролировать его при низкой температуре даже в течение длительного времени придиричиво работает.

**Строгий контроль температуры:** если температура превышает 35 степени, аппарат прекратит работу, это может также защитить безопасность терапии ручки, особенно для баров и кварцевого фильтра.

**Тайвань импортированных источник питания:** лучший источник питания на рынке, подтвердить машину стабильной и достаточно энергии.

**Германия импортировала бары:** подтвердить снимаем машины более 5000000 раз и иметь достаточное количество энергии.

#### **5. Снижение затрат на пробег**

С меньшим количеством времени обработки и длительный срок службы, блок эксплуатационные расходы на каждого клиента значительно снижается.

#### **6. В Lanуан, вы можете найти наиболее подходящую машину для вашей красоты карьеры**

**Индивидуальные** сочетание функций для удовлетворения различных целей красоты.

**Различные случаи варианты** чтобы соответствовать другой стиль в вашей рабочей комнате.

**Продукт детальные изображения:**



## Описание товара:

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Пункт                         | <a href="#">Удаление 808 волос лазера диода</a> для клиники, салона и больницы |
| Модель №.                     | LY-DL1                                                                         |
| Тип                           | лазер                                                                          |
| Тип лазера                    | Semiconductor / замерзает безболезненный лазер                                 |
| Q-Switch                      | Нет                                                                            |
| Стиль                         | стационарный                                                                   |
| Лазерный прибор рабочий режим | Импульсный режим                                                               |
| Охлаждение Fin                | 240 * 2                                                                        |
| длина волны                   | 808nm + 10nm                                                                   |
| Свет размер пятна             | 10мм * 16мм                                                                    |
| ширина импульса               | 10-300ms                                                                       |
| Максимальная энергия импульса | 3J-140J                                                                        |
| Импульсы энергии              | 140J + 10J                                                                     |
| Лазерный прибор питания       | 1200W                                                                          |
| Входная мощность              | 1600Вт                                                                         |
| Рабочее напряжение            | 110V + 10%, 50 Гц                                                              |
| Язык экранного меню           | Китайский, английский                                                          |
| спецификация страхования      | Макс 10 А                                                                      |
| Размер (машина)               | 1180 * 500 * 385mm                                                             |
| вес                           | ≈51kg                                                                          |

## Обслуживание:

1. Технические инструкции документы.
2. Техническая поддержка по фото-, видео- и онлайн-обучения.
3. Ответ в течение 24 часов.

## Гарантия:

Одна гарантированность года, пожизненное содержание.  
Наша техническая поддержка инженеров будет постоянной.

## Пакет, Shipping & Amp; Доставка:

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| пакет     | Приборы хорошо упакованы пенопласт, воздушной коробки или фумигации деревянных ящиков. |
| Перевозка | По воздуху, по морю или курьерским.                                                    |
| Доставка  | 3-10 рабочие дни                                                                       |



**Контактное лицо: Racher Cheng**

**Tel & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178**

**Skype: sales2@lanyuansupply.com**

**Эл. адрес: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**